

Al igual que **SHP Wassertechnik GmbH**, **SHP Scientifique SAS** es una filial al 100 % de **SHP Steriltechnik AG**, una empresa alemana de renombre en el ámbito de la esterilización por vapor, con sede en Sajonia-Anhalt. Fabricamos exclusivamente en Alemania siguiendo unos elevados estándares de calidad que se controlan de forma continua. Además, contamos con la certificación ISO 9001; nuestros autoclaves están homologados por el TÜV y llevan el marcado CE.

UNA VISIÓN GENERAL DE NUESTROS LABOKLAV FABRICADOS INTERNAMENTE.

LABOKLAV 25




LABOKLAV 55-195 con o sin bastidor



## SERVICIO DE AUTOCLAVE

**Laboratorios, farmacias, medicina, industria, sector agroalimentario, pruebas de productos, investigación, desarrollo**

- ◆ para todos los fabricantes y todos los tipos
- ◆ condiciones equitativas
- ◆ fiabilidad y competencia
- ◆ interlocutores directos in situ
- ◆ tiempos de respuesta cortos
- ◆ transparencia de precios
- ◆ Los trabajos son realizados por personal cualificado
- ◆ trabajos en los ámbitos de la seguridad biológica, la seguridad genética, las salas blancas y la protección radiológica

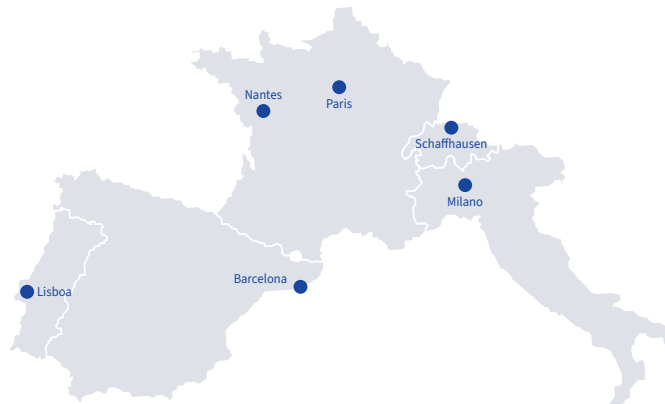


SHP Scientifique SAS  
6 Boulevard Montmartre | 75009 Paris  
Tel. +33 1 39 80 99 82  
Correo electrónico: [contact@shp-scientifique.fr](mailto:contact@shp-scientifique.fr)  
[www.shp-scientifique.fr/es](http://www.shp-scientifique.fr/es)



## SERVICIO DE AUTOCLAVE

- ◆ Puesta en servicio
- ◆ Mantenimiento ◆ Revisión ◆ Calibración
- ◆ IQ-OQ Validaciones de procesos
- ◆ Comprobaciones eléctricas de conformidad con la normativa local
- ◆ Comprobaciones internas / externas / de resistencia
- ◆ Independiente de la marca

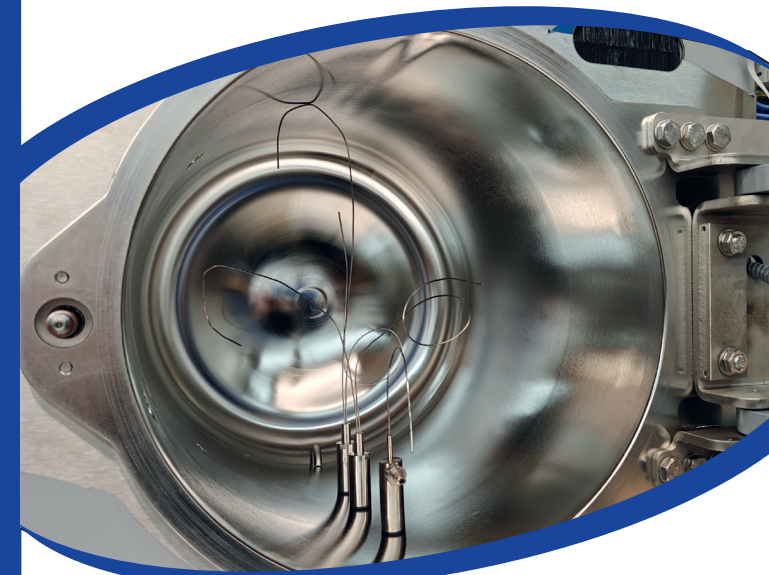

RÁPIDO  
COMPETENTE  
FIABLE

### Calibración de la cadena de medición

La calibración de los sensores permite verificar la precisión y la exactitud de los aparatos. Nuestros técnicos de mantenimiento se aseguran de que el autoclave funcione correctamente y ofrezca el rendimiento requerido.

### Calificación de la instalación (IQ)

La calificación de la instalación (IQ) verifica la idoneidad del lugar de instalación, las características físicas del autoclave y la exhaustividad de la documentación.

### Cualificación operativa (OQ)

Para garantizar resultados seguros y estériles, se realiza un perfil de cámara vacía mediante registradores de datos. La cualificación operativa (OQ) garantiza que los aparatos y los sistemas cumplan los requisitos definidos durante la cualificación de diseño. Las pruebas permiten confirmar que el aparato funciona correctamente.

### Cualificación de rendimiento (PQ)

La cualificación de rendimiento (PQ) garantiza que el autoclave proporcione de forma fiable el rendimiento de esterilización requerido en el marco de su funcionamiento diario y asegura la seguridad y la calidad a largo plazo de los productos esterilizados.

Para garantizar resultados seguros y estériles, su autoclave debe cumplir con las normas (como EN 285 e ISO 17665). Validamos periódicamente los autoclaves para garantizar una esterilización fiable dentro de los parámetros definidos. Para ello, se realizan pruebas con registradores de datos colocados en el producto y se valida el proceso de esterilización.

### Mantenimiento

Ofrecemos servicios de mantenimiento independientes de la marca, basados en una lista de comprobación, para autoclaves con un volumen de presión de hasta 1000 litros.

### Revisiones periódicas

Las revisiones periódicas prescritas por la normativa vigente son realizadas por nuestro personal cualificado e incluyen la inspección exterior e interior, así como la comprobación de la resistencia.

### Zonas de control

Nuestros técnicos de servicio también prestan sus servicios en zonas de control, incluidas las zonas de seguridad biológica, de seguridad genética, las salas blancas y las zonas de protección radiológica.

### Competentes y fiables

Nuestros técnicos de servicio garantizan una ejecución 100 % fiable de todas las tareas. Es posible una ampliación de la garantía si el mantenimiento prescrito lo realiza nuestro servicio posventa.

**Todos nuestros técnicos de servicio son «personas cualificadas de conformidad con la Directiva sobre equipos a presión». Estamos a su disposición no solo para estos servicios, sino también para ofrecerle otros servicios a medida.**

### Contáctenos:

**Tel. +33 1 39 80 99 82**

**Correo electrónico: [contact@shp-scientifique.fr](mailto:contact@shp-scientifique.fr)**

ASESORAMIENTO  
DISEÑO DE PROYECTOS  
SERVICIO

Con **SHP Wassertechnik GmbH**, le ofrecemos un servicio impecable en los siguientes ámbitos:

- ◆ Tratamiento del agua potable  
Filtración, desalinización, descalcificación
- ◆ Tratamiento del agua de pozo  
Desferrización, desmangанизación, eliminación de nitratos
- ◆ Tecnología de membranas  
ultrafiltración, ósmosis inversa
- ◆ Técnica de dosificación  
pH, desinfección, protección contra la cal/la corrosión
- ◆ Control de la legionela
- ◆ Técnica de medición y regulación
- ◆ Técnica para piscinas
- ◆ Tratamiento del agua de calefacción, del agua de calderas y del agua de refrigeración
- ◆ Productos químicos y agentes de dosificación
- ◆ Regeneración de cartuchos de intercambio iónico

